



スライドレールスタンドR10

ブーム可動部にボールベアリングを採用したブームスタンド

- ブーム可動部にボールベアリングを採用した顕微鏡用ブームスタンド。ボールベアリングにより滑らかな水平移動が可能です。
- フォーカスアーム部は様々な角度に調整可能。鏡筒を斜めに取り付けたり、水平方向に取り付けたりと自由度の高いスタンドです。
- ベースにはピラー取り付け位置が2箇所あり、スタンドの縦使い・横使いができます。
- 顕微鏡を載せる部分のマウント径は内径76mmです。オプション品の鏡筒ホルダーを併用すると、外形45mmや50mmの顕微鏡を取り付けることも可能です。
- このスタンドには照明装置が付いていません。必要に応じてリングライト等の照明装置を併用して下さい。

FEATURES 特徴

様々な顕微鏡やビデオマイクロスコープと組み合わせてお使い頂けます。

鏡筒ホルダー（オプション品）を併用すると、マウント外径が45mmや50mmの顕微鏡を載せてお使い頂くことができます。

マウント径が76mmの顕微鏡と一緒にお使い頂けます。
この写真ではズーム型実体顕微鏡LW-820を取り付けています。



鏡筒ホルダーH4576(45mm)+
ビデオズーム顕微鏡MV-550との併用例



鏡筒ホルダーH5076(50mm)+
ビデオズーム顕微鏡XV-440との併用例



3種類のフォーカスアームの取付方法


フォーカスアームとスライドレールの取付方法は3種類あります。

- ・ジョイント方法A: フォーカスアームが後屈します。
- ・ジョイント方法B: フォーカスアームが360°回転します。
- ・ジョイント方法C: フォーカスアームが前屈します。

ジョイント方法A

(スライドレールの上に
フォーカスアームをセット)


水平方向に左右 105° ずつ首振り可能

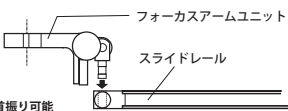

ジョイント方法B

(スライドレールの横穴に
フォーカスアームをセット)


スライドレールの中心軸のまわりに 360° 回転可能

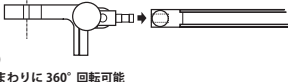




ジョイント方法C

(スライドレールの下に
フォーカスアームをセット)

水平方向に左右 85° ずつ首振り可能

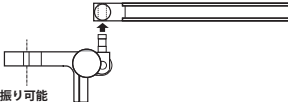

※ジョイント方法Bの場合
フォーカスアームユニットはスライドレールの中心線を軸
としてその周りを 360° 回転可能

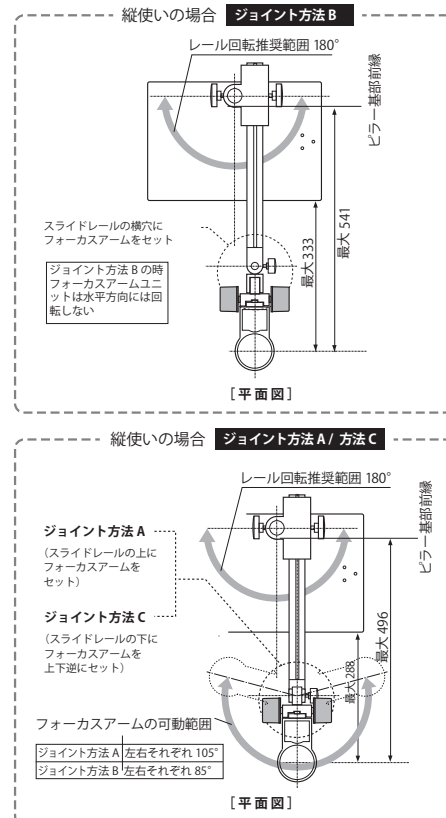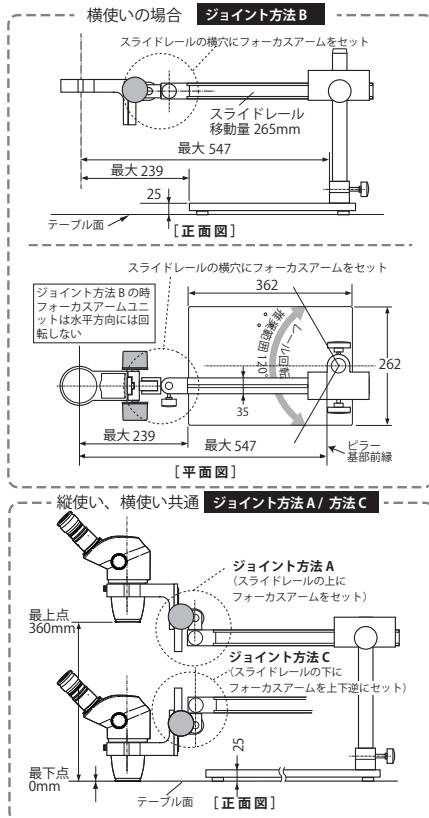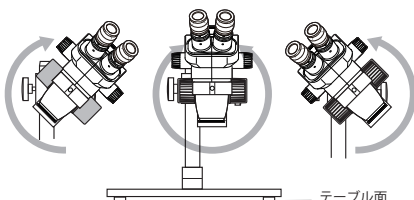

SPECIFICATION 仕様

フォーカスアームマウント	直径76mm	重量	15.3kg	※外観・仕様は若干の変更がある場合があります。
--------------	--------	----	--------	-------------------------

WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
レイマー顕微鏡オンラインショップ: wraymer.com