

# BX-2700TL

LED照明搭載

## LED照明を搭載してリニューアル!

### 生物医学・農学・工業分野など幅広い分野に適した生物顕微鏡


BX-2700TL は、高品質アクロマート対物レンズ、広視野接眼レンズでクリアで広視野の像が得られます(DIN規格品)。

逆レボルバ、ワイドメカニカルステージ。生物医学・農学・工業分野など幅広い分野でご使用いただけます。病院の病理診断や大学の研究施設での使用に最適です。

位相差ユニット、写真撮影装置、暗視野コンデンサなどのオプションをご用意しております。

撮影用直筒は付属のJISアダプタ使用により内径23.2mm/外径25mm(JIS鏡筒と同サイズ(汎用サイズ))になりますので、他社のカメラアダプタもご利用いただけます。Cマウントアダプタも付属します。

USBカメラやカメラアダプタなど、撮影用のオプションも豊富に取り揃えております。入力電圧AC100~240Vに対応したワールドワイド対応製品です。

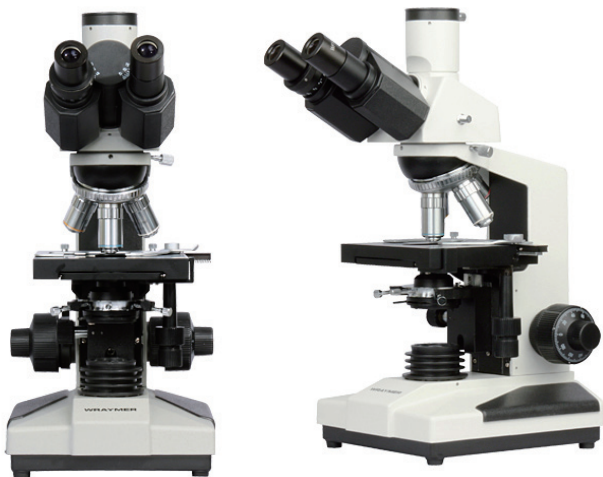

## FEATURES 特長

- ・ 長寿命の高輝度白色LEDを搭載(3W、5000~5500K、調光機構あり)
- ・ 逆レボルバ
- ・ 粗微動同軸焦点システム(テンション調整機構、リミットストッパー、最小目盛り0.002mm)
- ・ 広視野接眼レンズ、アクロマート対物レンズ採用
- ・ ワイドメカニカルステージ(125mmX135mm、可動域35mmX75mm)
- ・ 上下機構付きアッペコンデンサ NA=1.25、コンデンサ絞り付き
- ・ 位相差ユニット、暗視野コンデンサ、写真撮影装置等のオプション有
- ・ 瞳孔間距離調整範囲:53mm~75mm
- ・ 入力電圧:AC100~240V
- ・ 重量:6.2Kg
- ・ 寸法:高さ:398mm, ベース:180x222mm



※プラスチック製キャリーケースが付属します。持ち運びに便利です。

## SPECIFICATIONS 仕様一覧

接眼レンズ	10X (18mm)	標準仕様		
広視野	16X (11mm)	オプション		
	20X (11mm)	オプション		
対物レンズ	アクロマート対物レンズ			
倍率	光学系	開口数(NA)	作動距離(W.D.)(mm)	
4X	乾燥系	0.1	37.4	標準仕様
10X	乾燥系	0.25	6.6	標準仕様
20X	乾燥系	0.40	1.85	オプション
40X (安全装置付)	乾燥系	0.65	0.64	標準仕様
60X (安全装置付)	乾燥系	0.85	0.20	オプション
100X (安全装置付)	油浸系	1.25	0.19	標準仕様
レボルバ	逆レボルバ(4穴)			標準仕様
鏡筒	三眼(30°)			標準仕様
撮影装置	USBデジタルカメラWRAYCAM			オプション
	CCDカメラ(アナログ)			オプション
	デジタルカメラアダプタASH860			オプション
	一眼レフカメラアダプタSA20			オプション

暗視野コンデンサ	乾式暗視野コンデンサ: NA=0.77-0.91	オプション
	湿式暗視野コンデンサユニット: NA=1.25-1.40	オプション
	絞り付アクロマート対物レンズ100X	オプション
位相差ユニット	位相差用アクロマート対物レンズ(10X/0.25PHP, 20X/0.40PHP, 40X/0.65PHP(spring), 100X/1.25PHP(oil, spring))、位相差用ターレットコンデンサ、芯出し望遠鏡、フィルタ(ブルー、グリーン、イエロー)	オプション
アダプタ	JISアダプタ(汎用:内径23.2mm/外径25mm)、Cマウントアダプタ1倍	標準仕様
その他付属品	フィルタ(ブルー、すりガラス)、イマージョンオイル、ヒューズ(スペア)、ビニール製ダストカバー、プラスチックケース	標準仕様

**WRAYMER®** 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F  
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com  
レイマー顕微鏡オンラインショップ: wraymer.com