

Cマウントアダプタ




顕微鏡用Cマウントアダプタ

ニコン・オリンパス・ライカ・ツァイス製顕微鏡でご使用いただける、顕微鏡用Cマウントアダプタです。


Cマウント規格のCCDカメラやUSBカメラなど、顕微鏡用カメラを各メーカーの顕微鏡に取り付けることができます。

ニコン製顕微鏡用・オリンパス製顕微鏡用は光学系の入ったCマウントアダプタをラインナップ。接続するカメラのセンサーサイズや必要な撮影範囲に応じて、適切な縮小倍率のCマウントアダプタをお選びいただけます。各社顕微鏡の三眼鏡筒部に対応しておりますが、一部適合しない機種もございます。弊社ホームページにて適合機種を参照いただき、使用可否をご判断ください。

Nikon用Cマウントアダプタ

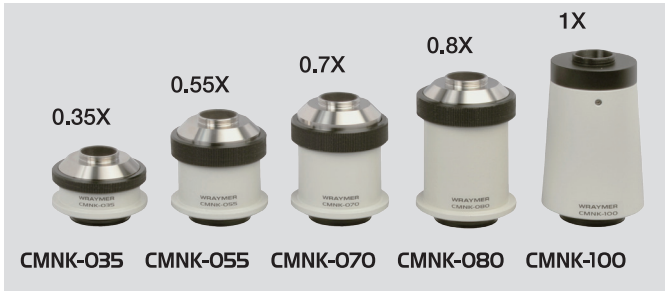


Nikon 顕微鏡の三眼鏡筒部に取り付けるCマウントアダプタです。接続する顕微鏡用カメラのセンサーサイズに合わせてお選びいただける、5種類の製品をご用意しています。

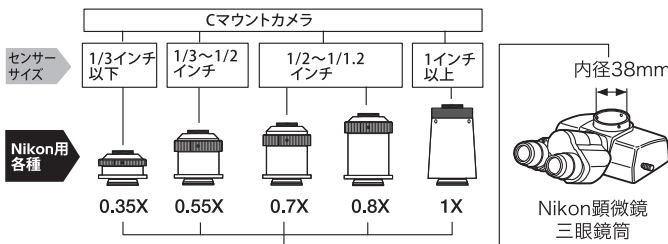

OLYMPUS用Cマウントアダプタ




Olympus顕微鏡の三眼鏡筒部に取り付けるCマウントアダプタです。焦点調節機構を備えているため、接眼レンズでの観察とカメラ撮影の同焦点調節が可能です。接続する顕微鏡用カメラのセンサーサイズに合わせてお選びいただける、5種類の製品をご用意しています。

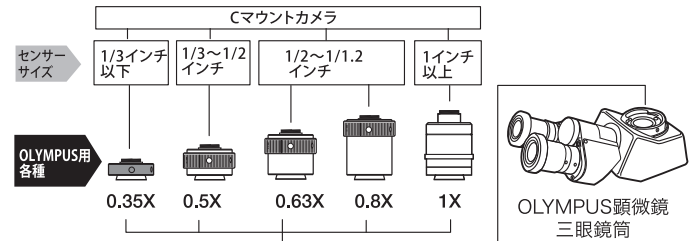

ダイレクトCマウントアダプタ(主にNikon用)



主にNikon顕微鏡のTV直筒Y-TVに取り付ける、光学系無しのダイレクトCマウントアダプタです。

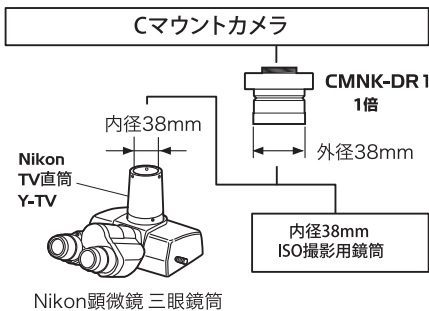

Leica用Cマウントアダプタ



Leica顕微鏡の三眼鏡筒部に取り付ける、光学系無しのダイレクトCマウントアダプタです。

ZEISS用Cマウントアダプタ



Zeiss顕微鏡の三眼鏡筒部に取り付ける、光学系無しのダイレクトCマウントアダプタです。

WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
 TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
 レイマー顕微鏡オンラインショップ: wraymer.com