

DLS60

LEDスポットライト



2本のフレキシブルアームで照明方向を自在に調整可能な高輝度LEDスポットライト

高輝度白色LED(色温度:6500K)を搭載した2本のフレキシブルアームを備え、自由な方向・角度から照明光を照射できるスポットライト型LED照明システムです。

卓上スタンドと、顕微鏡用スタンドの支柱(角柱・円柱)に取り付けるための取付金具が付属します。

卓上スタンドは顕微鏡スタンドの下に挿入することが出来るため、非常に省スペースでのご使用が可能です。

無段階ダイヤル式の光量調節機構のため、観察に適した光量に調節することができます。

顕微鏡の照明装置としてはもちろん、目視検査や作業用の照明装置としてもご使用いただける、活用範囲の幅広いLED照明装置です。

卓上スタンドや、角柱・円柱に取り付けるための金具が付属します。

●卓上スタンド

厚さ2mmの薄型設計なので、顕微鏡スタンドの下に挿入することができ、省スペースな設計となっています。




卓上スタンド



卓上スタンド使用例▶

●円柱用取付具

右記のサイズに適合する円柱に装置を固定することができます。

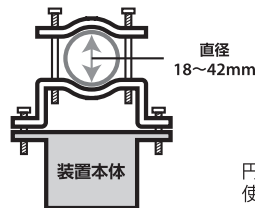


円柱用取り付け具使用例▶



●角柱用取付具(大・小)

右記のサイズに適合する角柱に装置を固定することができます。

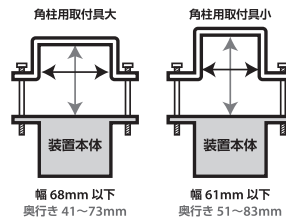

角柱用取り付け具使用例▶



SPECIFICATIONS 仕様一覧

| | | | |
|--------|------------|------|----------------------------------|
| LED | 高輝度白色LED | 消費電力 | 3W + 3W |
| LED寿命 | 約30,000 時間 | 電源入力 | AC100-240V / 50-60Hz ワールドワイド電源仕様 |
| 推奨作業距離 | 30 - 90 mm | 電源出力 | DC5V2A |
| 最大光量 | 300 lm | コード長 | ACアダプタケーブル長1.6m |
| 色温度 | 6500 K | 重量 | 0.9 kg (本体のみ) |

WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F

TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com

レイマー顕微鏡オンラインショップ: wraymer.com