

# LDS60

## LEDリングライト




4つの照明モードで照射方向の変更が可能。

60個の高輝度白色LED(3.2V/20mA)を有し、高輝度な冷光照明が得られます(拡散板付)。

リングライトは4分割されており、1/4エリア点灯・両側2/4エリア点灯・3/4エリア点灯・全周点灯の4つの照明モードがあり、照明の照射方向の変更が可能です。8段階光量調整機構有り(全周点灯時のみ)。



### 4つの照明モード

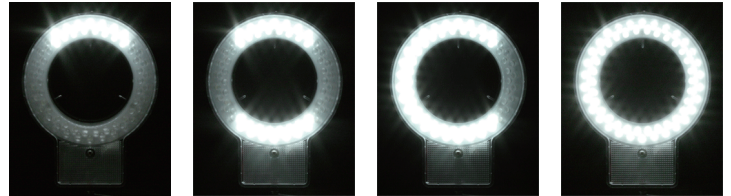

## SPECIFICATIONS 仕様一覧

LED 60灯高輝度白色LED 3.2V/20mA

内径/外径 60mm/102mm

対応鏡筒外径 約42~60mm

推奨作業距離 50~150mm

最大光量 16000 Lux (作業距離100mm時)

照明モード 1/4エリア点灯・両側2/4エリア点灯・3/4エリア点灯・全周点灯

光量調整 8段階(全周点灯時のみ)、拡散板付

色温度 6500K

電源 DC12V/400mA (付属のACアダプターにて100V入力)

消費電力 6.5W

付属電源 ACアダプタ(コード長:1.5m)(入力:100-120V 50/60Hz 0.3A、出力:DC12V 1A)

## WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F

TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com

レイマー顕微鏡オンラインショップ: wraymer.com