




TW-531

LED照明搭載

230mmの作業距離を持つ双眼実体顕微鏡

- ・とても長い作業距離を持つ双眼実体顕微鏡です。作業距離(対物レンズ～検体間距離)はなんと230mm。
- ・作業スペースが十分確保できるので、歯科技工用ハンドピース、はんだこて、ナイフ、ピンセットなどの工具を用いた作業も楽に行えます。
- ・広視野でシャープな立体像が得られます。電子産業をはじめとする工業分野の組み立て作業や製品の検品、歯科技工、彫刻・彫金等の手工芸、研究・教育分野での動植物の解剖・観察、地質学や考古学分野に適しています。
- ・水平アームは中折れ角 0~90°の間で自由に角度を調整できます。又、水平アームに対する鏡筒の取り付け角度や水平アーム自体の取り付け角度を任意に調整できますので、壁面や斜面などの観察も可能です。
- ・水平アームがより長いロングアームタイプもご用意しております。より広いワークスペースが得られます。
- ・長寿命でより明るい高輝度白色LED照明搭載。

寸法図

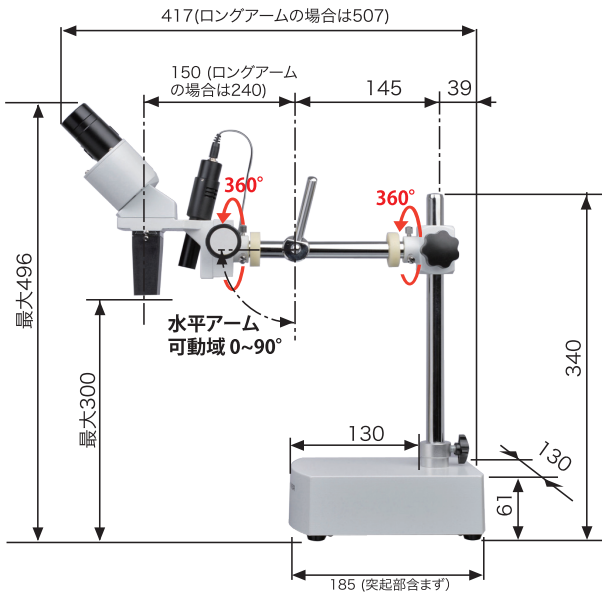

SPECIFICATIONS 仕様一覧

総合倍率	10倍
鏡筒型式	双眼(眼幅調整範囲55-75mm, 視度補正機能±5dp)
焦点調整	鏡体上下動式、焦点ハンドル、ピラー固定ネジ
対物レンズ	倍率 実視野 (mm) 作業距離(W.D) _(mm) 1x 約20 230
接眼レンズ	WF10x / 20mm (広視野)
照明	落射照明 3W LED照明
電源	入力:AC110~120V、50/60Hz

寸法	ベース:幅130mm、奥行き185mm、高さ61mm、底面-ピラー高:340mm
最大ワーク高さ	約70mm(鏡筒を最も上方に位置付けたときに、約70mmの厚さのワークを観察することができます)
重量	5.3kg (ロングアームタイプ 6.6kg)
付属品	アイ・シールド、ビニール製ダストカバー、焦点ハンドル調整工具、2Aヒューズ(スペア)、電源コード

WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
 TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
 レイマー顕微鏡オンラインショップ: wraymer.com